


Müheles Audiofiles oder direkt eingesprochene Audioaufnahmen in Text umwandeln.

1

Unter dem Menüpunkt Transkribieren findet sich der Audio zu Text-Konverter von Brainy. Es können fertige Audiodateien wie MP3, WAV, DSS und M4A als auch direkt eingesprochene Texte verarbeitet werden. Die Spracherkennung erfasst bis zu vier unterschiedliche Sprecher.

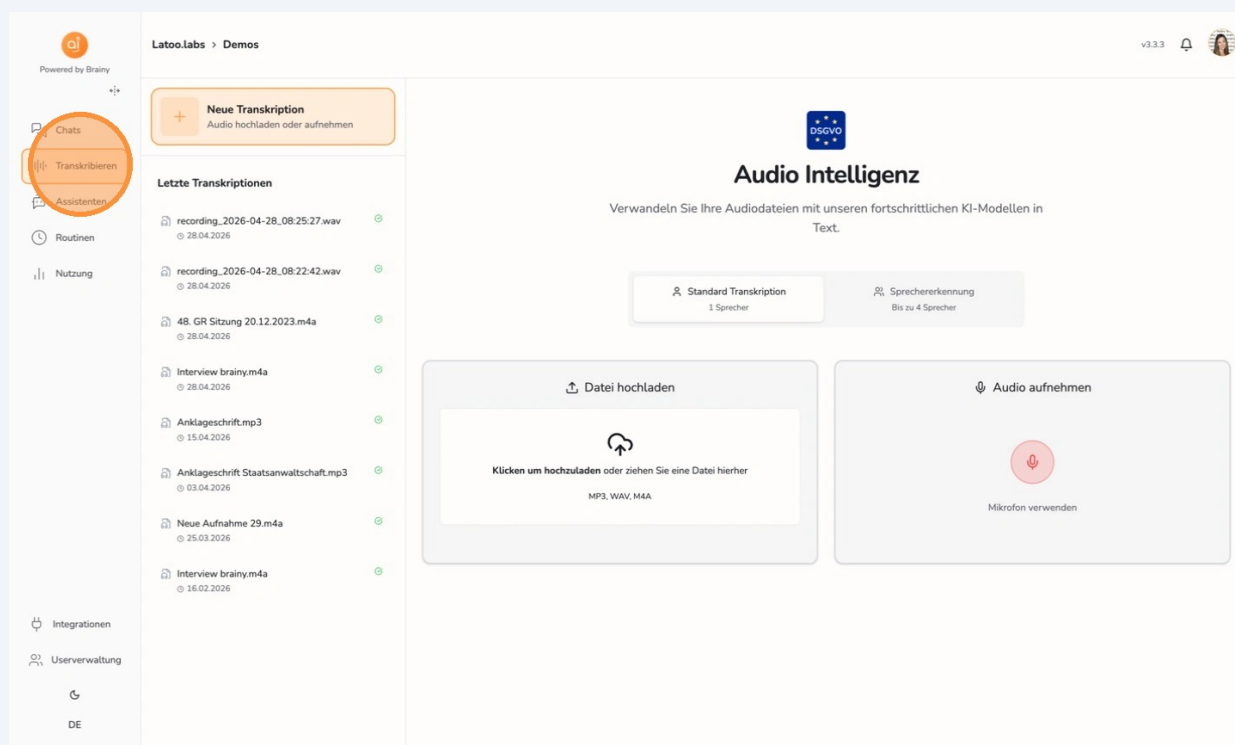

Transkription mit Datei

2

Im ersten Schritt muss die Anzahl der Sprecher angegeben werden welche im Audio-File zu hören ist.


The screenshot shows the Latoo.Labs interface. On the left is a sidebar with navigation options: Chats, Transkribieren (highlighted), Assistenten, Routinen, and Nutzung. Below this are Integrationen, Userverwaltung, and a language selector set to DE. The main content area is titled 'Latoo.Labs > Demos' and 'v3.3.3'. It features a 'Neue Transkription' button and a list of 'Letzte Transkriptionen'. The central part is titled 'Audio Intelligenz' with a sub-header 'Verwandeln Sie Ihre Audiodateien mit unseren fortschrittlichen KI-Modellen in Text.' Below this are two main options: 'Standard Transkription' (1 Sprecher) and 'Sprechenerkennung' (Bis zu 4 Sprecher). The 'Standard Transkription' option is highlighted with a red circle. Below these are two large buttons: 'Datei hochladen' and 'Audio aufnehmen'. The 'Datei hochladen' button has a sub-button that says 'Klicken um hochzuladen oder ziehen Sie eine Datei hierher' and lists supported formats: MP3, WAV, M4A.

3


Anschließend öffnet sich mit Klick auf den Button **"Datei hochladen"** ein Dateiauswahlfenster als Pop-Up.

This screenshot is identical to the one above, showing the Latoo.Labs interface. The 'Datei hochladen' button is highlighted with a red circle, indicating the next step in the process. The interface elements, including the sidebar, navigation options, and the 'Audio Intelligenz' section, are the same as in the previous image.

4 Gewünschte Audio-Datei aus der Ablage auswählen.

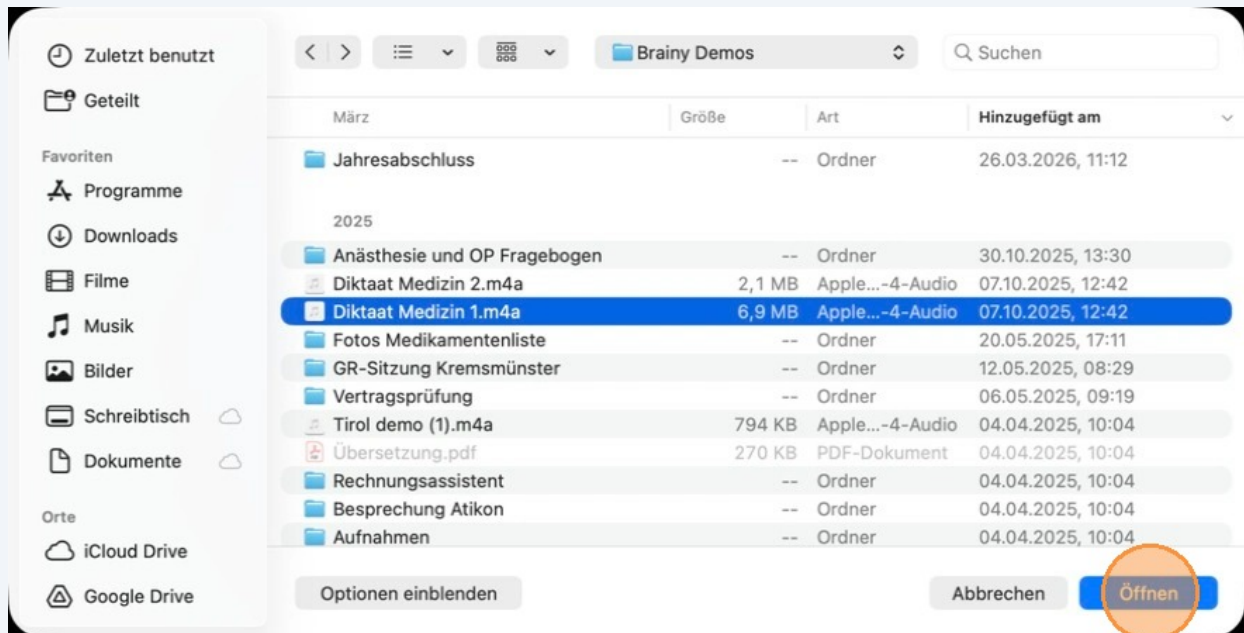

5 Die Audio Datei wird geladen und verarbeitet. Je nach länge und Komplexität kann dies etwas Zeit in Anspruch nehmen.

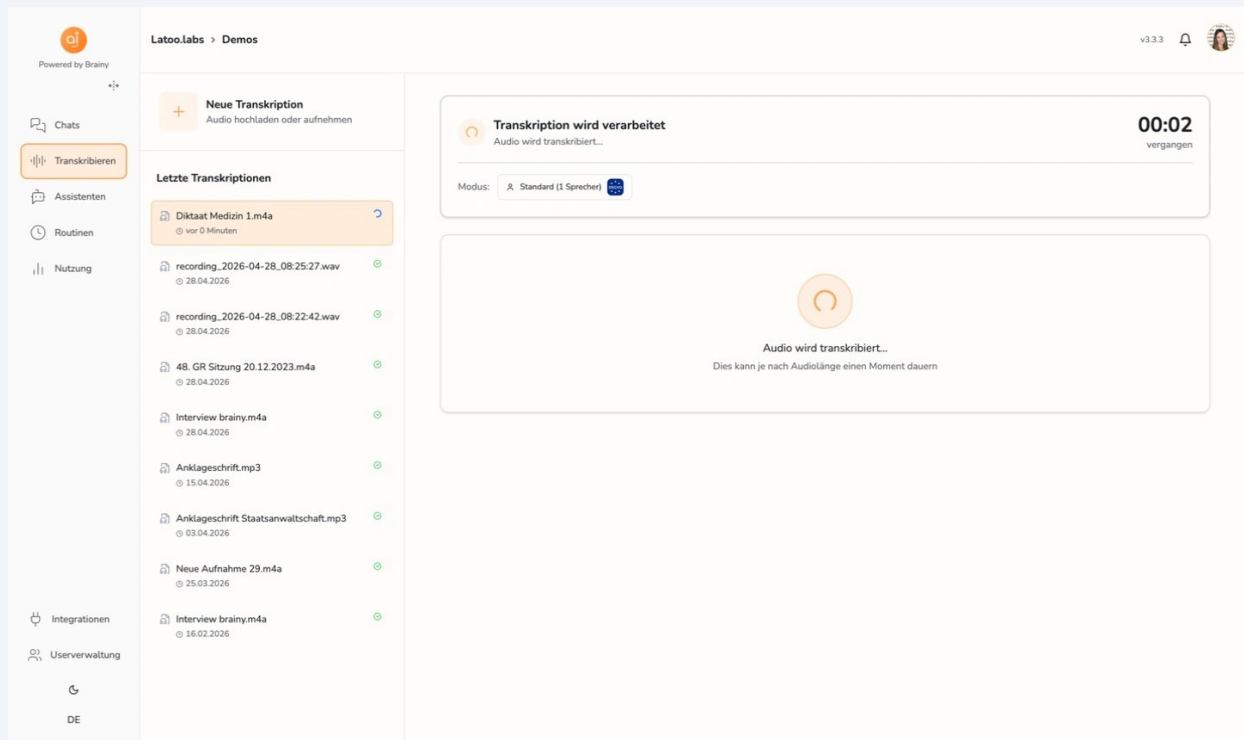

Transkript kopieren

6

Fertig transkribierte Dateien werden in der Historie mit einem grünen Haken gekennzeichnet. Mit Klick auf den Button **"Kopieren"** wird der Text in die Zwischenablage kopiert und kann dann am gewünschten Zielort eingesetzt werden.

The screenshot shows the Latoo.Labs interface. On the left is a sidebar with navigation icons and labels: 'Chats', 'Transkribieren' (highlighted), 'Assistenten', 'Routinen', 'Nutzung', 'Integrationen', 'Userverwaltung', and 'DE'. The main content area is titled 'Latoo.Labs > Demos'. It features a 'Neue Transkription' button and a list of 'Letzte Transkriptionen' including 'Diktaat Medizin 1.m4a' (marked with a green checkmark). Below this is an audio player for 'Diktaat Medizin 1.m4a' with a waveform and a '1.0x' speed control. The 'Transkript' section shows a search bar and a text transcript. A red circle highlights the 'Kopieren' button in the transcript header. A status bar at the bottom right indicates 'In Zwischenablage kopiert'.

Transkript exportieren

7

Mit Klick auf den Button **"Exportieren"** wird eine TXT File in den Downloadordner gespeichert.

The screenshot shows the Latoo.Labs web application. On the left is a sidebar with a 'Transkribieren' button highlighted. The main content area is titled 'Latoo.Labs > Demos'. It features a 'Neue Transkription' button and a list of 'Letzte Transkriptionen'. The selected transcription is 'Diktaat Medizin 1.m4a'. Above the text transcription is a waveform player. The text transcription itself is a medical report. In the top right of the transcription area, there are buttons for 'Kopieren', 'Exportieren' (circled in red), and 'Senden an'. A small notification box at the bottom right confirms the export: 'Export erfolgreich' and 'Transkript als transcript.txt exportiert'.

Transkript mit Assistenten und Agenten weiter bearbeiten

8

Mit Klick auf den Buttons **"Senden an"** öffnet sich ein Menü. Hier kann ein gewünschter Brainy Assistent oder Agent ausgewählt werden in dem die Daten weiter bearbeitet werden.

Latoo.Labs > Demos v3.3.3

Neue Transkription
Audio hochladen oder aufnehmen

Letzte Transkriptionen

- Diktaat Medizin 1.m4a
vor 0 Minuten
- recording_2026-04-28_08:25:27.wav
28.04.2026
- recording_2026-04-28_08:22:42.wav
28.04.2026
- 48. GR Sitzung 20.12.2023.m4a
28.04.2026
- Interview brainy.m4a
28.04.2026
- Anklageschrift.mp3
15.04.2026
- Anklageschrift Staatsanwaltschaft.mp3
03.04.2026
- Neue Aufnahme 29.m4a
25.03.2026
- Interview brainy.m4a
16.02.2026

Diktaat Medizin 1.m4a

1.0x

Transkript

Kopieren Exportieren **Senden an**

Suchen...

Workspace Assistenten

- Microsoft
- Personal Mail Assistant
- Suche spezielle Seite
- Bespr. To DO Assi
- Angebot

Patientenbrief für Patientin Y. Ich berichte, wie folgt, über die Behandlung vom 26. 28. 2025. A Frau Y wurde im Juli 2025 im Rahmen eines stationären Krankenhausaufenthalts ein tachykales Überleitungsdiagnostiziert. Es erfolgte damals eine erfolgreiche elektrische Kardioversion. Bei einer von 0 Punkten wurde keine ORK eingeleitet. Aktuell ist Frau Y völlig beschwerdefrei und gut bei ausführenden Blutdruckaufzeichnungen vorgelegt. Der Blutdruck zu Hause steht Normoton, Prädikt Aktuelle Medikation Pantyp 40mg 1, 0, Concor 1, 25mg 1, 00, Venlafaxin 150mg 1, 00, Clozeta 00, Tritic 150mg 0, 01. Vorerkrankungen im kardiovaskulären Risikoprofil, Doppelpunkt, Immunitätsopatie typ basistov, Verdacht auf beginnendes Parkinson- Syndrom, EBMS unter Risperidon und fraglich Quetialan, Familienanamnese, Doppelpunkt, Diabetes mellitus, Vorhoff- Flimmern, Nikotin, Negativalkohol, Negativstuhl, Unauffällig, Harnunauffällig, Allergienjodhaltiges, Kontrastmittel, Bewegung wenig, klinischer Status, korythmisch ein enormer Frequenz, kein pathologisches Herzergeräusch, auskultierbar, pulmo-vesikuläre Atmung, beidseits kein Rasselgeräusch, Abdomen weich, keine Druckschmerzen oder pathologischen Resistenzen, Wirbelsäule nicht klopft, Töhlend, Blutdruck 110 zu 79mm Hg, Gewicht 75kg, Körpergröße 160cm, Bodymassindex berechnet 25, 39kg pro Quadratmeter, EKG- Doppelpunkt, Noroventasinusrhythmus 78 pro Minute, PQ im Normbereich, QRS 76ms, Linkstyp, regelrechte Airprogression, Unauffällige, Repolarisation, Echokardiografie, Doppelpunkt, gute linksventrikuläre Pumpfunktion, ohne regionäre Wandbewegungsstörungen, Aortenwurzel, 23mm Aortenklappe, Trikoskipe, gute Öffnung, guter Schluss, kein Hinweis auf Stenose oder Insuffizienz, linker Vorhof mit 31mm, normal dimensioniert, IVST 0, 8cm, LVADT 40mm, kein Hinweis auf Rechtsherzbelastung, SPAP berechnet, 19 plus 3mm Hg, minimale Midrakklappeninsuffizienz, EZA 0, 9, EZE- 5, kein Thrombus, kein Perikarderguss, AVAMAX 1, 2m pro Sekunde, als nächstes Sonografie Karotis, unauffällige Intimamediatheke mit dem Mittel 0, 8mm, links Doppelpunkt, unauffälliges Flussprofil in ACC,

9

Der ausgewählte Assistent wird automatisch geöffnet. Im Eingabefeld des Chatfensters wird das Transkript als TXT Datei angehängt. Sofern der Assistent oder Agent entsprechende Prompts hinterlegt hat kann diese Datei kommentarlos abgeschickt und bearbeitet werden. Andernfalls wird ein Arbeitsauftrag benötigt.

The screenshot displays the Latoo.Labs web application interface. On the left is a sidebar with navigation options: Chats, Transkribieren, Assistenten, Routinen, and Nutzung. The main area is titled 'Medizinisches Diktat' and contains a welcome message from the assistant. Below the message is a chat input field with a 'Senden' button. A file named 'transcription.txt' is attached to the input field, indicated by a red arrow. The interface also shows a list of other assistants like 'Legal Assistant', 'Nano Banana Pro', and 'Wörtliches Transkript Legal'.

Latoo.Labs > Demos

Powered by Brainly

Chats

Transkribieren

Assistenten

Routinen

Nutzung

Legal Assistant
Verfassen Sie einfach juristische...

Nano Banana Pro
Bildgenerierung

Wörtliches Transkript Legal
Transkribieren Sie Ihr Diktat...

Rechnung Scan Assistent
Analysieren und extrahieren Sie...

Dokumenten Vergleichs Assistent
Vergleichen Sie zwei oder mehr...

GPT

Mehr laden

Suchen...

Alle Privat Geteilt

Heute

Patientenbrief Vorhof-Flattern Fr.Y

Protokoll erstellen Anfrage

Sinoom AGB Änderungen Vergleich

Gestern

Medizinisches Diktat

Medizinisches Diktat

Hallo! Ich bin Ihr Assistent für **medizinische Diktate**. Ich helfe Ihnen dabei, Ihr medizinisches Audiodiktat zu verarbeiten, indem ich Erkennungsfehler bereinige und lateinische medizinische Begriffe durch ihre Abkürzungen ersetze. Bitte beginnen Sie mit Ihrem Diktat oder laden Sie Ihre Audiodatei hoch.

Frage mich etwas...

transcription.txt x

Senden

Das zugrundeliegende KI-Modell kann Fehler machen – prüfe Wichtiges immer selbst.



Powered by Brainy

Chats

Transkribieren

Assistenten

Routinen

Nutzung

Integrationen

Userverwaltung

DE

Latoo.Labs > Demos



Legal Assistant
Verfassen Sie einfach juristische...



Nano Banana Pro
Bildgenerierung



Wörtliches Transkript Legal
Transkribieren Sie Ihr Diktat...



Rechnung Scan Assistant
Analysieren und extrahieren Sie...



Dokumenten Vergleichs Assistant
Vergleichen Sie zwei oder mehr...



GPT

Mehr laden

Alle

Privat

Geteilt

Heute

Patientenbrief Vorhof-Flattern Fr. Y

Protokoll erstellen Anfrage

Sinoom AGB Änderungen Vergleich

Gestern

Patientenbrief Vorhof-Flattern Fr. Y

Klinischer Status: Rhythmisch, normale Frequenz, kein pathologisches Herzgeräusch auskultierbar, pulmonal vesikuläre Atmung bds., kein Rasselgeräusch, Abdomen weich, keine Druckschmerzen oder pathologischen Resistenzen, Wirbelsäule nicht klopfschmerzhaft, BD 110/79 mmHg, Gewicht 75 kg, Körpergröße 160 cm, BMI berechnet 25,39 kg/m².

EKG: Normofrequenter Sinusrhythmus 78/min, PQ im Normbereich, QRS 76 ms, Linkstyp, regelrechte R-Progression, unauffällige Repolarisation.

Echokardiographie: Gute linksventrikuläre Pumpfunktion ohne regionale Wandbewegungsstörungen, Aortenwurzel 23 mm, Aortenklappe trikuspid, gute Öffnung, guter Schluss, kein Hinweis auf Stenose oder Insuffizienz, linker Vorhof mit 31 mm normal dimensioniert, IVST 0,8 cm, LVEDD 40 mm, kein Hinweis auf Rechtsherzbelastung, SPAP berechnet 19+3 mmHg, minimale Mitralklappeninsuffizienz, E/A 0,9, E/a' 5, kein Thrombus, kein Perikarderguss, AV Vmax 1,2 m/s.

Sonographie Karotis: Unauffällige Intima-Media-Dicke im Mittel 0,8 mm.

Links: Unauffälliges Flussprofil in ACC, ACI und ACE, keine Plaquebildung sichtbar, ACI PS 1 m/s, ED 0,4 m/s, orthograd perfundierte A. vertebralis.

Rechts: Unauffälliges Flussprofil ohne Hinweis auf Stenose in ACI, ACC und ACE, ACI PS 0,7 m/s, ED 0,2 m/s, orthograd perfundierte A. vertebralis.

Diagnosen: V.a. Schizophrenie, V.a. beginnendes Parkinson-Syndrom, Vorhof-Flattern mit 2:1 Überleitung und erfolgreicher elektrischer Kardioversion 06/24.

Prozedere: Zusammenfassend besteht Z.n. erfolgreicher elektrischer Kardioversion bei bekanntem tachykardem Vorhof-Flattern und CHA₂DS₂-VASC-Score von 0 Punkten. Patientin Y ist kardiorespiratorisch kompensiert, sie ist beschwerdefrei und ohne Hinweis auf organische Herzerkrankungen.

Empfohlene Medikation: Concor 1,25 mg 1-0-0, Venlafaxin 150 mg 1-0-0, Clozapin 25 mg 1-0-1, Ferretab 1-0-0, Tritico 150 mg 0-0-1, Pantip absetzen.

Ich empfehle internistische Kontrolle in einem Jahr.

Frage mich etwas...






Medizinisches Diktat

Senden

Das zugrundeliegende KI-Modell kann Fehler machen – prüfe Wichtiges immer selbst.

Transcription mit Audioaufnahme

11 Im ersten Schritt wird die Transkription mit Sprechererkennung ausgewählt.

The screenshot shows the Latoo.Labs interface. On the left is a sidebar with navigation options: Chats, Transkribieren (highlighted), Assistenten, Routinen, and Nutzung. The main area is titled 'Audio Intelligenz' and features a 'DSGVO' badge. Below the title, it says 'Verwandeln Sie Ihre Audiodateien mit unseren fortschrittlichen KI-Modellen in Text.' There are two buttons: 'Standard Transkription' (1 Sprecher) and 'Sprechererkennung' (Bis zu 4 Sprecher), with the latter highlighted by an orange circle. Below these are two large boxes: 'Datei hochladen' (with a file upload icon and text 'Klicken um hochzuladen oder ziehen Sie eine Datei hierher MP3, WAV, M4A') and 'Audio aufnehmen' (with a microphone icon and text 'Mikrofon verwenden').

12 Durch einen Klick auf das Mikrofonsymbol wird die Audioaufnahme gestartet. Gegebenenfalls muss zuvor die Freigabe für das Mikrofon erteilt werden.

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Audio aufnehmen' button in the 'Audio aufnehmen' box is now highlighted with an orange circle, indicating that the audio recording process has been initiated.

13

Im Fenster werden Aufnahmezeit und eine Tonspur eingeblendet. Nach erfolgreicher Aufnahme auf den Button **"Aufnahme beenden"** klicken, dadurch wird die Datei zum Transkribieren abgeschickt.

The screenshot displays the Latoo Labs web application interface. On the left is a sidebar with navigation options: Chats, Transkribieren (highlighted), Assistenten, Routinen, and Nutzung. Below these are Integrationen and Userverwaltung. The main content area is titled 'Latoo Labs > Demos' and features a 'Neue Transkription' button. A list of 'Letzte Transkriptionen' includes files like 'Diktat Medizin 1.m4a' and 'recording_2026-04-28_08:25:27.wav'. The central panel, 'Audio Intelligenz', explains the service: 'Verwandeln Sie Ihre Audiodateien mit unseren fortschrittlichen KI-Modellen in Text.' It offers two options: 'Standard Transkription' (1 Sprecher) and 'Sprechererkennung' (Bis zu 4 Sprecher). At the bottom, a recording window shows a waveform and a timer at '00:13'. It includes an 'Abbrechen' button and a prominent 'Aufnahme beenden' button, which is circled in orange to indicate the next step.

14

Unterschiedliche Sprecher werden vom System mit einem Platzhaltertext und einer Farbe versehen. Die Namensänderung erfolgt durch Klick auf das Stift-Symbol neben dem jeweiligen Platzhaltertext. Aus A wird Philipp. Die Änderung kann mit dem betätigen der Enter-Taste oder dem Klick auf das Häkchen-Symbol bestätigt werden. Die Änderung wird automatisch auf die gesamte Transkription übernommen.

Latoo.Labs > Demos

Powered by Brainy

Chats

Transkribieren

Assistenten

Routinen

Nutzung

Integrationen

Userverwaltung

Neue Transkription
Audio hochladen oder aufnehmen

Letzte Transkriptionen

recording_2026-05-05_09:10:23.wav
vor 0 Minuten

Diktaat Medizin 1.m4a
vor 2 Minuten

recording_2026-04-28_08:25:27.wav
28.04.2026

recording_2026-04-28_08:22:42.wav
28.04.2026

48. GR Sitzung 20.12.2023.m4a
28.04.2026

Interview brainy.m4a
28.04.2026

Anklageschrift.mp3
15.04.2026

Anklageschrift Staatsanwaltschaft.mp3
03.04.2026

Neue Aufnahme 29.m4a
25.03.2026

recording_2026-05-05_09:10:23.wav

1.0x

Transkript

Kopieren Exportieren Senden

Diagnostik (Sprecher)

Sprecher: A

Im Transkript suchen...

A: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von AI Brainstorming. Hier bekommst du Wissen, das du morgen schon umsetzen kannst. Du erfährst, auf welche Trends du aufspringen solltest und welche du besser liegen lässt. Dazu gibt es Anwendungsbeispiele, die nicht nur auf dem Papier funktionieren. Und selbstverständlich kommt alles aus erste Hand. Expertenwissen direkt aus der Praxis. Lass uns also loslegen. Hallo Hannes.

B: Hallo Philipp.

A: Jetzt hat es eine Teil dauert, dass wir wieder Zeit gefunden haben. Shame on us leider. Aber wir haben einiges über Weihnachten weitergebracht, einiges bei Brainy weitergebracht. Einige Dinge haben sich finalisiert und darum hätte auch mal vielleicht ein kurzes Review, was so die letzten Wochen und Monate bei uns los war. Sehr viel passiert. Definitiv. Ja, was haben wir gemacht? Der Brainy kann mittlerweile Agents. Wir haben Agent-Demos für drei Stück gehabt, die alle restlos ausverkauft waren. Wir haben viele Kooperationen aufgegriffen, Präsentationen entsprechend, dass man auch diese Agent-Thematik an Kunden, Interessenten und bei diversen Vorträgen und finale Runden was. Investoren betrifft, die hat aber zum Glück das Engagement nicht gefehlt, in der Nacht und am Wochenenden weiter zu tun und eigentlich die ganze Mannschaft hat. War total coole, spannende Zeit und ich glaube gerade mit dem Thema Agenten ist jetzt in aller Munde, ich muss wirklich sagen, war jetzt auch immer bei den Agenten Demonstrationen dabei und bin ja sehr tief in der Bubble und es ist total faszinierend, wie deflasht. Was man eigentlich immer wieder selbst ist, wenn man sieht, was da möglich ist oder

15

Um einzelne Wörter wie beispielsweise falsch transkribierte Namen im Nachhinein zu ändern reicht ein Doppelklick auf das gewünschte Wort, ein Textfeld erscheint und eine manuelle Änderung ist nun möglich. Ebenso besteht die Möglichkeit, durch einen Klick auf ein Wort im Text direkt an die entsprechende Stelle im Audio zu springen.

The screenshot shows the Brainy interface with a sidebar on the left containing navigation options like 'Chats', 'Transkribieren', 'Assistenten', 'Routinen', and 'Nutzung'. The main area displays a list of 'Letzte Transkriptionen' (Recent Transcriptions) and a detailed view of a specific transcription titled 'recording_2026-05-05_09:10:23.wav'. The transcript shows a conversation between Philip and Hannes. A double-click on the word 'Philipp' in Hannes' response has triggered a text input field, allowing for manual editing. The audio waveform at the top shows the timing of the speech.

16

Mithilfe des Suchfelds ist es möglich das gesamte Dokument nach bestimmten Wörtern zu durchsuchen.

This screenshot shows the same Brainy interface as the previous one, but with the search functionality demonstrated. In the transcript view, the search bar 'Im Transkript suchen...' is active, and the word 'Philipp' has been entered. The search results highlight the occurrences of 'Philipp' in the transcript, specifically in Hannes' response. The interface also shows the 'Letzte Transkriptionen' list on the left and the audio waveform at the top.